


Bedside Test mit M-Trap[®] Technologie



ABTest Card Ref: 79076



Die getesteten roten Blutkörperchen, die ein Antigen tragen, interagieren mit den entsprechenden Antikörpern und zeigen einen roten Fleck (positive Reaktion). Die roten Blutkörperchen, die das Antigen nicht tragen, interagieren nicht mit den Antikörpern und passieren die Membran. Der Fleck erscheint hellgrün oder weiß (negative Reaktion).

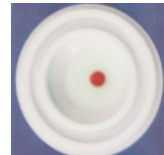

Positive Reaktion



Negative Reaktion

Vorteile der ABTest Card[®]

- klare Gliederung für schnellen und einfachen Gebrauch
- spezielle Technik mit M-Trap Membranen
- in nur drei Schritten fertig
- klar ablesbare Ergebnisse auch bei schwachen Reaktionen
- einfach in der Bedienung
- kein Überlaufen von Reagenzien
- haltbar bei Raumtemperatur
- keine Kontamination, die gesamte Flüssigkeit wird in der Innenschicht gebunden

ABD Pad mit M-Trap[®] Technologie



Der ABD Pad mit M-Trap Technologie ist eine schnelle und einfache Lösung für die Blutgruppenbestimmung. Durch die spezielle Oberfläche und Membrantechnik wird die gesamte Flüssigkeit, inklusive Blut, in den inneren Schichten der Nöpfchen gebunden. Somit bleibt die Oberfläche trocken und es besteht kein Kontaminationsrisiko. Schnell und sicher im Gebrauch eignet sich der ABD Pad besonders gut für Tests am Bett des Patienten sowie für mobile Tests in und außerhalb von Labors (z.B: Vortestung von Spenden).

